

# ZooTek

## 系統使用說明

### 前置作業

- 一 請先將無線 APP、NFC 閘道器、單向閘道器、雙向閘道器、SERVER、平板，手錶通電並打開電源
- 二 開啟後，將平板和 Server 連接上無線 APP。
- 三 點選 Care management 進入系統
- 四 輸入【帳號】與【密碼】，點選登入，進入主畫面。

### 功能介紹

- 到院登錄：
  1. 點選到院登錄，進入登錄畫面。
  2. 輸入【病歷號】，點選輸入後，將手錶靠近 NFC 閘道器進行感應，感應成功，螢幕顯示看診【科別】及【病歷號】，即表示完成到院登錄、病歷號與手錶的綁定。
- 診間報到：
  1. 點選診間報到，進入報到畫面。
  2. 將手錶靠 NFC 閘道器進行感應，感應成功，螢幕顯示報到【科別】及【報到號碼】，即表示完成診間報到。
- 隨選衛教：
  1. 點選隨選衛教，進入衛教畫面。
  2. 將手錶靠 NFC 閘道器進行感應，感應成功，螢幕顯示衛教內容。
- 繳回手錶：
  1. 點選繳回手錶，進入繳回畫面。
  2. 將手錶靠 NFC 閘道器進行感應，感應成功，螢幕顯示【病歷號】繳回成功。

## 裝置介紹

- 電子圍籬：
  1. 點選電子圍籬，進入觀看畫面，
  2. 螢幕顯示電子圍籬範圍，若有【紅點閃爍】出現時，即表示該區有手錶接近，若無【紅點閃爍】，即表示該區無手錶靠近。
  
- 團體量測
  1. 點選團體量測，進入量測畫面。
  2. 螢幕上方顯示各項量測項目及功能，如：計步、心率、情緒壓力指數、睡眠、血壓、一鍵量測、全體統計、排程設定。
  3. 螢幕中間顯示所有手錶內的各項資訊，也可點選單一手錶，觀看單一手錶內的詳細資訊。
  4. 點選一鍵量測，量測所有生理資訊
  5. 點選全體統計，可觀看全體活動量及心率分佈、團體運動心率百分比，可點選螢幕下方【匯出資料】，即可將資訊處理成檔案，以便儲存及閱讀。
  6. 點選排程設定，可新增或刪除各項任務，任務內容包含【量測項目】以及【量測頻率】。

## 查詢資料

1. 打開 Google 瀏覽器 ，Google 書籤找到資料庫 
2. 登入使用者帳號(預設)

### 登入

帳號

---

密碼

---

**登入**

3. 進入資料庫查詢資料

### 手錶登錄系統

配對查詢 團體量測 電子圍籬 **資料查詢** 系統設定

[登出](#)

時間區間：  -  病歷號：

查詢項目： **HRV** **HR** 資料匯出： **CSV**


病歷號	sdnn	rmssd	lf	hf	lf/hf	nn50	stress	time
無	240.46	0.28	11265.16	14871.77	0.76	52	28	2019-01-17 15:49:08
無	43.53	0.05	162.28	864.28	0.19	9	68	2019-01-17 15:40:26

## 遠端連線

- 上網下載 TeamViewer



- 開啟 TeamViewer 滑鼠點擊圖示兩下

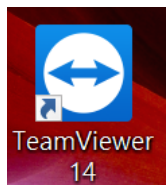

- 輸入遠端電腦 ID : 1174470413 (固定名稱)，輸入完點擊連線





- 輸入遠端電腦密碼 : zoetek (固定密碼) 輸入完點擊登入

### TeamViewer 驗證



請輸入您的夥伴電腦上所顯示的密碼。

密碼：




登入

取消



Zoetek Inc.



- 連線…….成功(如下圖)

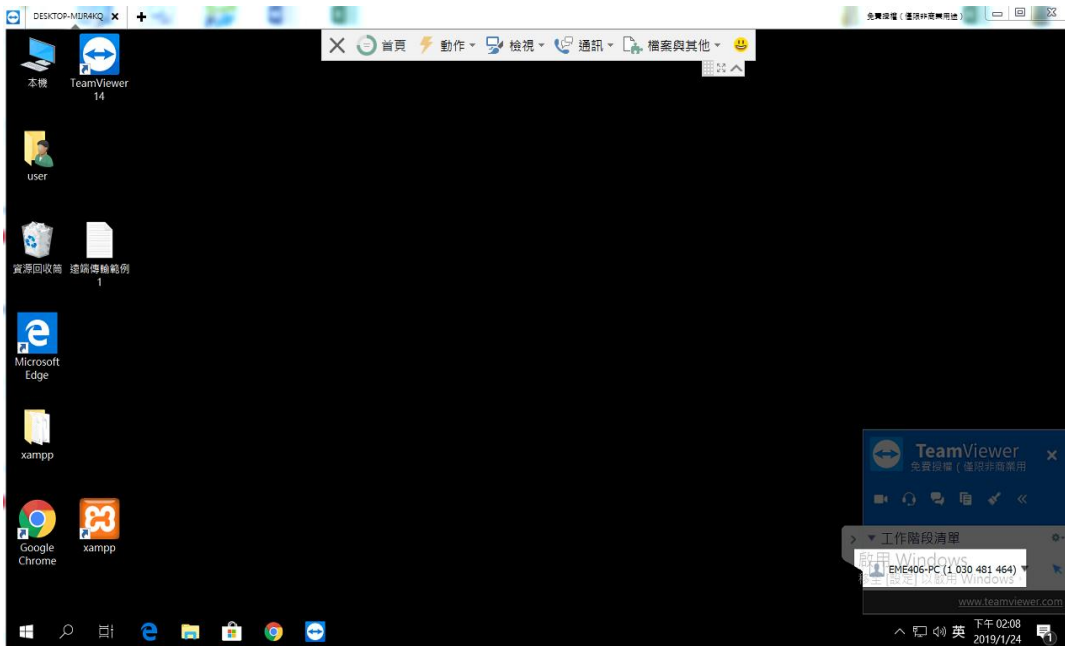

- 開啟檔案傳送功能



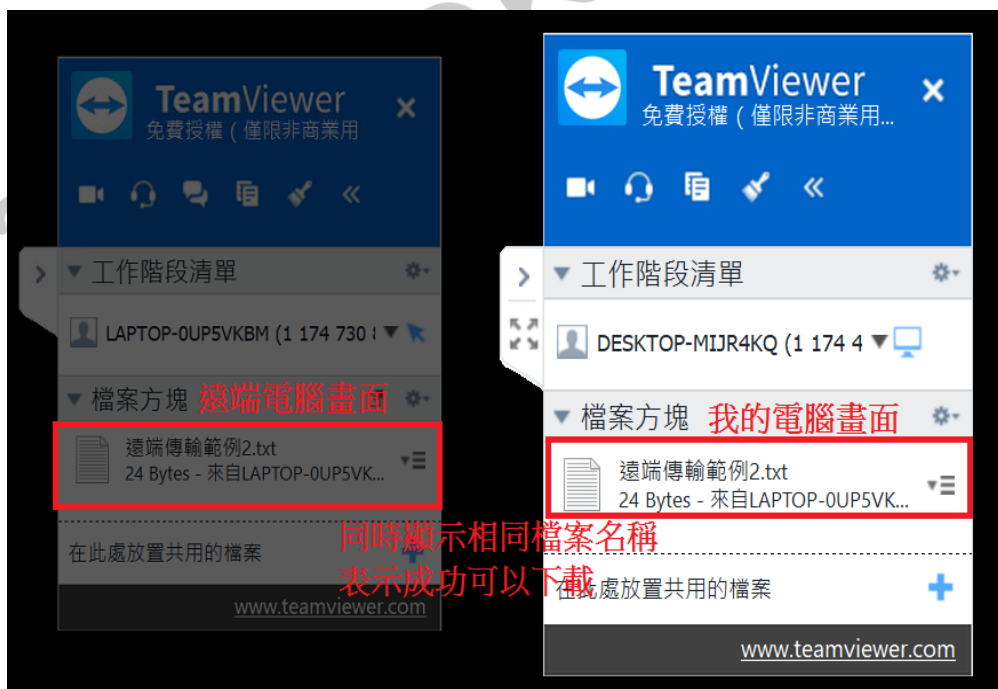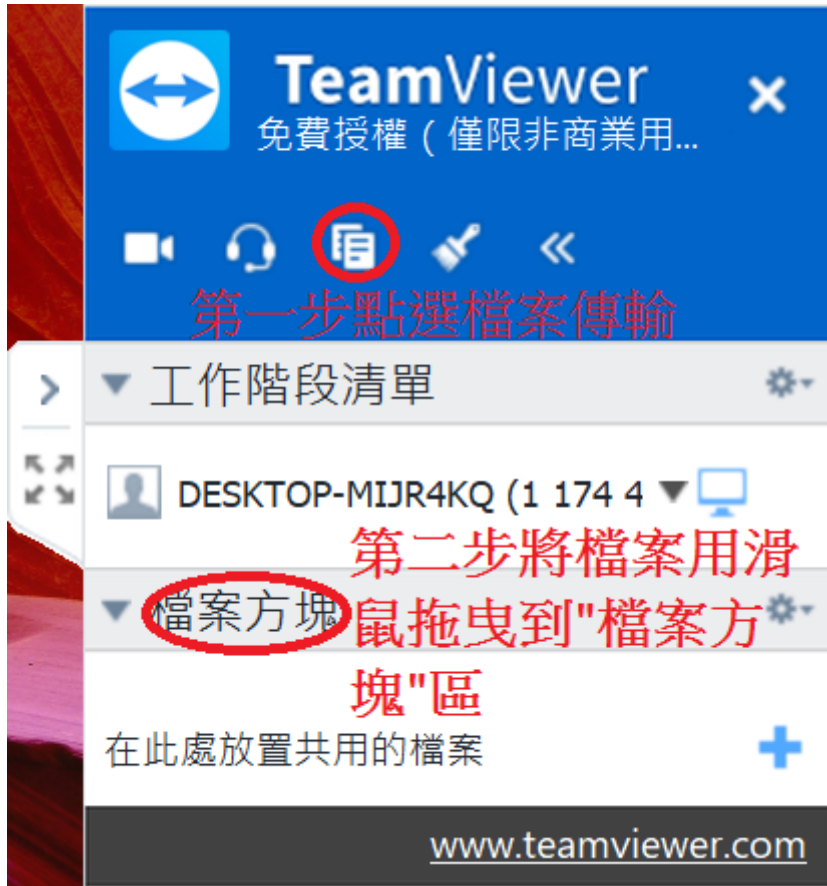

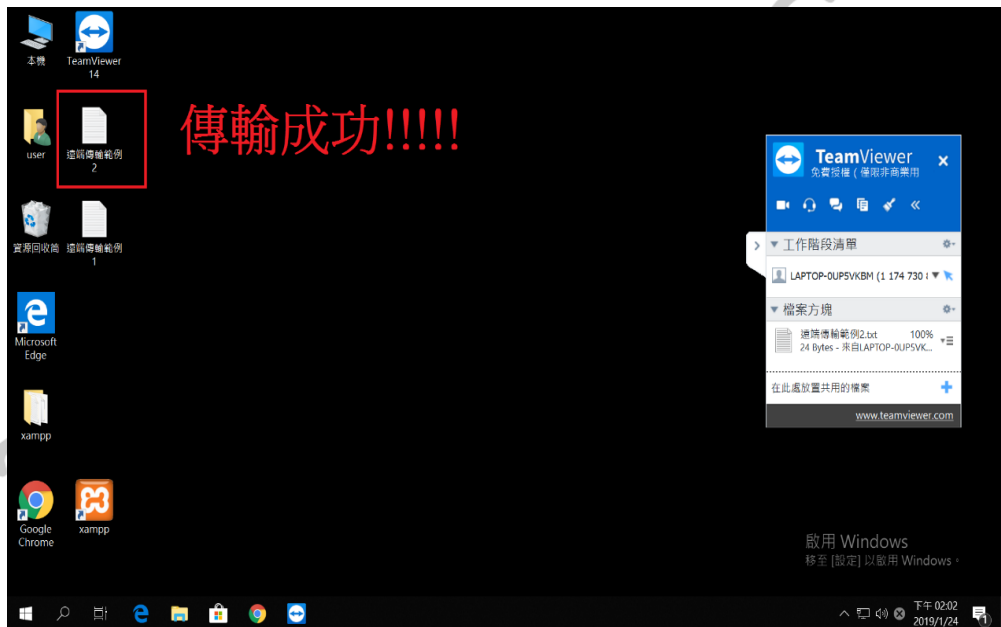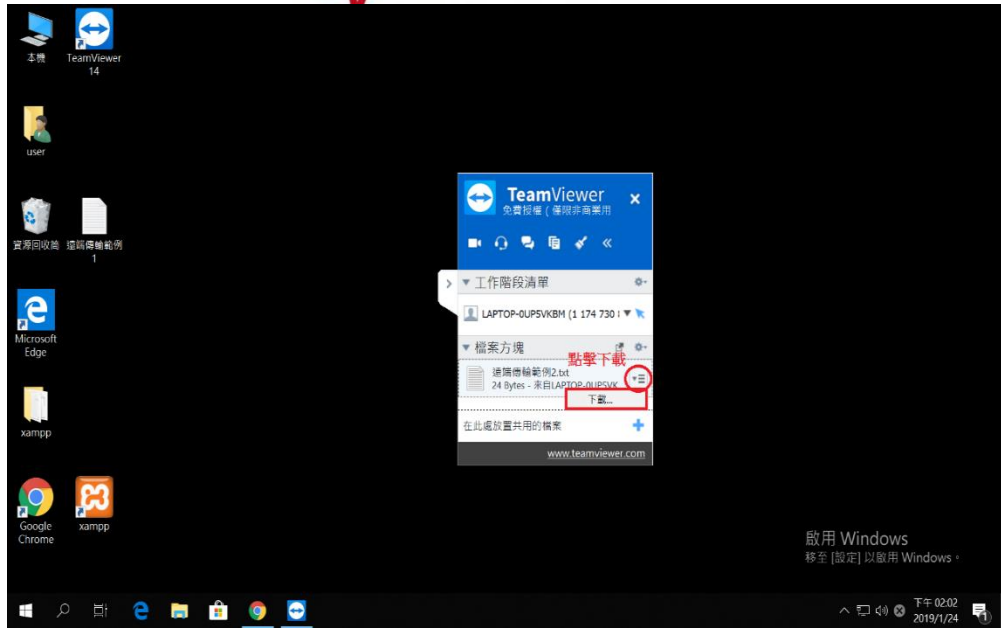

**END**